

U-waist PRO

Massager Device

NL17.01



NATURAL LOGISTICS
redefining global retail





U-WAIST-PRO Modelo NL17.01

Gebruikershandleiding

BELANGRIJKE INFORMATIE! BEWAAR DE INSTRUCTIES!

Voor het gebruik van dit apparaat, lees dan de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies.

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Als u het apparaat toewijst aan iemand anders geef diegene ook deze instructies.

TEKENS	BETEKENISSEN
	Deze instructies zijn onderdeel van dit apparaat. Ze bevatten belangrijke informatie over de behandeling en werking van het apparaat. Lees alle instructies aandachtig. Als deze aanwijzingen niet worden opgevolgd kunnen ernstige verwondingen ontstaan of het apparaat beschadigen.
WAARSCHUWING 	Waarschuwingen moeten worden gevolgd om de gebruiker voor blessures te behoeden.
WAARSCHUWING 	Deze richtlijnen moeten worden opgevolgd om schade aan het apparaat te voorkomen.
NOTE 	Deze instructies geven aanvullende informatie over de productie en de prestaties.
	Afvalverwerking volgens de Europese Richtlijnen Directive 2002/96 / EC (WEEE) op weggegooid elektronica en elektronische apparatuur (WEEE).


1. Product Omschrijving



U-Waist-PRO is een high tech apparaat dat een volledige oplossing biedt voor lumbale problemen en de meest voorkomende rugpijn.

Dankzij het TENS-systeem (Electro Nerve Trans-Stimulation), ontstaat er een betere veerkracht in de wervelkolom en rugspieren. Het zal de meest voorkomende ongemakken in dit gebied verminderen.

Het apparaat is CE- en ROHS-gecertificeerd volgens de eisen die door de Europese Unie zijn opgesteld.

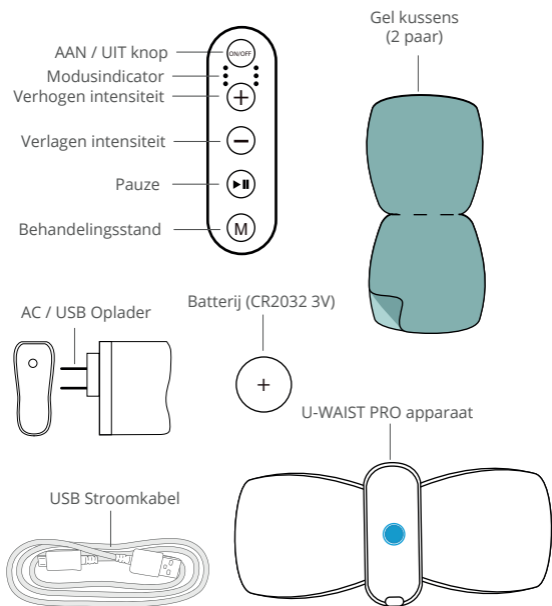

2. Product eigenschappen

- De U-Waist-PRO is ergonomisch ontworpen om elk deel van de rug te kunnen behandelen. Daarnaast heeft het 6 massagestanden en 20 intensiteitsniveaus.
- Makkelijk in gebruik, met afstandsbediening.
- Dit toestel bevat een adapter (5VDC 500mA) om het apparaat op te laden (Lithium batterij)
- De afstandsbediening werkt op een CR2032 batterij
- Comfortabel en modern apparaat
- U kunt het overal mee naartoe nemen omdat het een klein en licht formaat heeft en overal gebruikt kan worden

3. Gebruiksaanwijzing

Voordat u gebruik maakt van de U-Waist-PRO moet u de volgende stappen volgen:


1. Was en droog het gebied grondig. Gebruik het apparaat niet wanneer u nog sporen van olie of crèmes op uw lichaam heeft.
2. Doe een CR2032 batterij in de afstandsbediening. De plaats voor de batterij bevindt zich aan de achterkant van de afstandsbediening wanneer u het deksel naar beneden schuift.
3. Haal 2 gelkussens uit de doos en plaats ze op het apparaat zodat de woorden zichtbaar zijn. Verwijder het doorzichtige beschermfolie aan een kant en plak deze op de elektrode (zwarte gebied). Het kussentje moet het hele zwarte gebied bedekken. Druk stevig aan om een goede hechting te waarborgen.
4. Herhaal stap 3 voor het 2e gelkussen.
5. U-Waist-PRO is nu klaar voor gebruik.

LET OP: vergeet bij het gebruik van de U-Waist-PRO niet het andere beschermfolie te verwijderen zodat de gelkussens kunnen blijven kleven aan uw huid.

Gebruik van de U-WAIST-PRO:

1. Verwijder het doorzichtige beschermfolie van beide gelkussens. Gooi het doorzichtige beschermfolie NIET weg aangezien ze na het gebruik op de gelkussens worden teruggeplaatst om lijm te behouden. Vermijd dat andere voorwerpen of materialen in contact komen met het gelkussen omdat dit de hechtingseigenschappen kan verstoren.

2. Plaats de U-Waist-PRO op het gebied dat u wilt behandelen en zorg ervoor dat de gelkussens goed in contact komen met de huid. Het is aan te raden om het apparaat in dezelfde richting te plaatsen als de richting van de lijnen die op de kussens staan. Volg hiermee dezelfde richting als de richting van de spier die u wilt behandelen (horizontaal, verticaal of schuin).

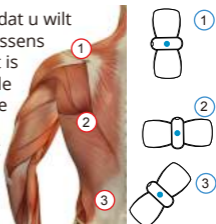

3. Druk op de AAN / UIT knop van het apparaat om het apparaat te activeren. Het blauwe licht zal gaan knipperen.

4. Om de afstandbediening te activeren drukt u op de AAN / UIT knop van de afstandsbediening. Links bovenin zal er een blauw lampje gaan branden. Om een stand te kiezen drukt u op de 'M' knop waarna het lampje verspringt naar de gekozen stand. De U-Waist-PRO start altijd automatisch met stand 1. Er zijn 6 verschillende massagestanden beschikbaar.

5. De behandeling zal na 20 minuten automatisch stoppen. Daarnaast kan de behandeling op ieder gewenst moment gestopt worden door op de AAN / UIT knop te drukken. Verwijder het apparaat niet tot op het moment dat de behandeling is gestopt.

6. Druk op de 'verhoog intensiteit' / '+' knop om de intensiteit te verhogen naar een voor u comfortabel niveau. Om de intensiteit op elk moment van de behandeling te verminderen, drukt u op de 'verminder intensiteit' / '-' knop.

Wanneer u de modus verandert, gaat de stroomtoevoer automatisch naar niveau 1 (minimum) als veiligheidsmaatregel. Onthoud dat de U-Waist-PRO 20 intensiteitsniveaus heeft. "-".


7. Als u de behandeling met de U-Waist-PRO wilt onderbreken, drukt dan op de 'pauze/afspelen' knop. Druk opnieuw op de 'pauze/afspelen' knop om de behandeling te hervatten. .

8. Als u het apparaat tijdens de behandeling uit wilt zetten, drukt u op de 'AAN / UIT' knop van de afstandsbediening.

9. Zodra de behandeling is beëindigd, plaats het beschermfolie terug op de gelkussens voor een veilige opslag.


1

Plaats de batterij in de afstandsbediening.

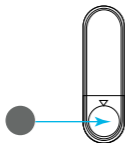


2

Verwijder het beschermfolie van één kant van de gelkussens en druk ze op het apparaat. Zodra de gelkussens blijven kleven aan het apparaat verwijdt u het beschermfolie aan de andere kant (bewaren voor later gebruik).

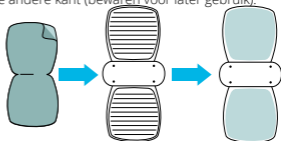


3

Plaats het apparaat ter behandeling op het door u gewenste gebied

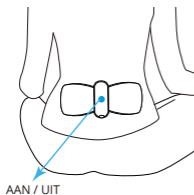

4

Zodra het apparaat geplaatst is, zet u het toestel aan door op de knop te drukken, Pak de afstandsbediening en druk op de AAN / UIT knop om het intensiteitsniveau geleidelijk te verhogen tot u een comfortabele instelling heeft gevonden.

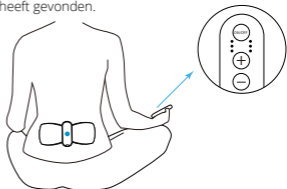

5

Plaats het beschermfolie weer op de gelkussens wanneer de sessie afgelopen is.



4. Duur van de behandeling

De U-Waist-PRO gebruiksduur is vooraf ingesteld en zal altijd 20 minuten zijn.

5. Onderhoud

Opladen van de batterij:

- De U-Waist-PRO heeft een herlaadbare batterij met USB-kabel / speciale kabel die verbinding maakt met het apparaat. Sluit de USB-kabel aan op de adapter en sluit het andere uiteinde aan op het apparaat om op te laden. Wanneer u de stekker in het stopcontact stopt laadt het apparaat automatisch op. Tijdens het opladen blijft het blauwe licht aan. Wanneer het blauwe licht verdwijnt, geeft dit aan dat de batterij volledig opgeladen is.
- Het laadproces duurt normaal gesproken 4 uur.
- Het is aan te bevelen het apparaat minimaal eens in de drie maanden op te laden, zelfs als het niet wordt gebruikt.
- Als u merkt dat het apparaat tijdens de behandeling kracht verliest, betekent dit dat de batterij (bijna) leeg is. Als dat het geval is, start dan het laadproces zoals hierboven beschreven.

Het apparaat schoonmaken

- Reinig het apparaat na gebruik met een zachte, licht vochtige doek. Als het apparaat te vies is, kunt u de doek ook met een kleine hoeveelheid neutrale zeep bevochtigen.
- Gebruik GEEN chemische of schurende reinigingsmiddelen. Het kan ervoor zorgen dat de kleur verslechtert.

 Zorg ervoor dat er GEEN water in het apparaat komt.

Zelfklevende gelkussens

- Om de langst mogelijke hechting van de gelkussens te verzekeren, maak ze voorzichtig schoon met een vochtige, pluisvrije doek

- Plaats het beschermfolie terug op de gelkussens zodra de behandeling klaar is. Sla het apparaat op inclusief beschermfolie, verwijder deze niet van het apparaat.

Opslag

- Bewaar het apparaat op een koele, goed geventileerde plaats.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.



6. Recycle Informatie

Let op de plaatselijke voorschriften betreffende de verwijdering van materialen. Recycle het apparaat volgens de European Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Richtlijn 2002/96 / EC van Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de desbetreffende gemeente die verantwoordelijk is voor afvalverwijdering.

7. Veiligheidsmaatregelen

- U-WAIST-PRO is niet waterbestendig. Maak het apparaat niet nat en zorg dat het niet in contact komt met vloeistoffen.
- Zorg dat de U-WAIST-PRO niet aan hitte blootgesteld wordt en gebruik het niet in de buurt van apparaten die sterke elektromagnetische golven zenden. Wanneer dit wel het geval is kan het storingen in/beschadigingen aan het apparaat veroorzaken.
- Stel de U-Waist-PRO niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Bescherm de U-Waist-PRO tegen stof, vuil en vocht.
- Wanneer de U-Waist-PRO niet goed werkt, stop dan onmiddellijk de behandeling.
- Maak GEEN gebruik van de U-Waist-PRO tijdens het bedienen van voertuigen of machines.
- Houd de U-Waist-PRO buiten bereik van kinderen.

8. Waarschuwingen

- Om schade en letsel te voorkomen, raden wij u aan het product in de volgende gevallen niet te gebruiken:
 - Wanneer u in het bezit bent van geïmplementeerde elektrische apparaten (bijvoorbeeld pacemakers)
 - Metaalimplantaten
 - Hartritme stoornissen
 - Hartproblemen (bijvoorbeeld epilepsie)
 - Zwangerschap
 - Na operaties waarin het genezingsproces kan worden beperkt door spiercontracties
 - Wanneer u de behandeling wilt toepassen op een ander gebied dan wat in deze handleiding wordt beschreven
 - Op plaatsen met overmatige luchtvochtigheid: bad en/of douche
- Het gebruik van U-Waist-PRO wordt aanbevolen:
 - Voor menselijk gebruik
 - Voor de ontwikkeling en het doel zoals gedefinieerd in de handleiding. Onjuist gebruik kan letsel/schade veroorzaken.
- De U-Waist-PRO is geen medisch apparaat; het geeft geen diagnose en behandelt geen ziektes.
- Probeer de U-Waist-PRO niet te repareren of demonteren. Als u problemen vaststelt, neem dan contact op met de verkoper. Als u de U-Waist-PRO zelf probeert te repareren, kan de garantie ingetrokken worden.

9. Veel gestelde vragen (FAQs)

U-Waist-PRO werkt niet:

Doe de volgende controles.

1. Zet het apparaat aan: brandde het lampje? Als het lampje niet aan ging, ga door naar het opladen van de batterij
2. Als het lampje brandt met een knipperend blauw licht, plaats het apparaat dan in het te behandelen gebied. Het is belangrijk dat u de werking van het apparaat voelt.

3. Pak de afstandsbediening en druk op de AAN / UIT knop. Het blauwe licht moet aan gaan en wanneer dit niet het geval is, ga door naar het vervangen van de batterij.
4. Als het lichtje dan brandt, druk dan op de intensiteitsknop totdat u het gewenste niveau bereikt heeft en geniet van de behandeling.

De huid wordt rood in het gebied waar het apparaat gebruikt is:

- Stop de behandeling.
- De roodheid van de huid moet gauw verdwijnen. Wanneer dit niet het geval is, is het raadzaam uw arts te raadplegen. De arts kan u verder onderzoeken.

10. Technische Specificaties:

Normale omstandigheden:

Power Device: DC 3,7 V (Lithium Batterij) 40mA
Duur van de behandeling: 20 minuten

Bewegingseigenschappen:

Frequentie: 110 Hz.
Bereik: 100 μ s.

Afstandsbediening:

Stroomkracht: 1 CR2032 (3,0V)

Gewicht en afmetingen:

Afmetingen apparaat: 191*90*18 mm.
Gewicht apparaat: 410 g.
Verpakking: Afmetingen: 225*126*65 mm
Gewicht: 525 g

11. Garantie

Neem contact op met uw dealer of rechtstreeks met de klantenservice. Als u het product wilt terugsturen, dient u aan te geven wat er mis is, voeg een kopie van uw ontvangstbewijs toe.

In dit geval gelden de volgende garantievoorwaarden:

1. Met betrekking tot de producten van Natural Logistics SL, staat een garantie voor een periode van twee jaar vanaf de datum dat het apparaat is gekocht. Wanneer u een klacht wilt indienen, moet de aankoopdatum worden bewezen met de aankoopbon of factuur.
2. Defecten in het materiaal worden kosteloos vervangen binnen de garantieperiode
3. De toepassing van de garantie leidt niet tot een verlenging van de garantietermijn wat betreft het apparaat of met betrekking tot het vervangen van onderdelen.
4. De garantie geldt niet voor:
 - a. Alle schade die is veroorzaakt door misbruik, door bijvoorbeeld het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
 - b. Door reparaties door de koper of ongeautoriseerde derden.
 - c. Verzendingschade veroorzaakt tijdens het vervoer van producent naar huis of tijdens het transport naar de technische dienst.
 - d. Accessoires onderworpen aan normale slijtage.

 Made in China Gemaakt in China	Designed by / Ontworpen door: Natural Logistics S.L. C/Ana Mariscal 5 28223 Pozuelo de Alarcón, Spain / Spanje
 U-WAIST-PRO	  2004/108/EC 2014/53/EU



U-waist
PRO