

INGEBRUIKNAME

- Plaats de 4 AA batterijen op de juiste wijze in het compartiment
- Om de carrousel te openen, drukt u rustig met uw duim het voorste lipje in.



- Het Beveiligd Automatische Multi-Alarm wordt geleverd met 6 papieren ringen. Op deze ringen staan de dagen van de week en het aantal keren dat er per dag medicijnen nodig zijn. Bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5 of 6 keer per dag. Selecteer de ring die bij uw medicijngebruik past en plaats die op de tray, recht voor de vakjes. De papieren hoekjes vouwt u om, zodat de ring vast blijft zitten.

Hierna vult u eenvoudig de carrousel met medicijnen. Hoe vaak u de carrousel moet vullen, hangt af van de dagelijkse dosis medicijnen.

- Bv.
- 1x daags, betekent navulling na 28 dagen
 - 2x daags, betekent navulling na 14 dagen
 - 3x daags, betekent navulling na 9 dagen
 - 4x daags, betekent navulling na 7 dagen
 - 5x daags, betekent navulling na 5 dagen
 - 6x daags, betekent navulling na 4 dagen

DISPLAY

Op de afbeelding hiernaast staan de symbolen van de display. Aan de linkerkant staat van boven naar beneden A1 tm A6. Dit zijn de alarmen.

Daarnaast ziet u de alarmtonen: a, b en c.

Links boven ziet u DST. Dit staat voor Day-light Saving Time, wat zomertijd betekent.



Alle lettercombinaties daarna, staan voor het automatisch instellen van de tijd d.m.v. RCC, Radio Controlled Clock, wat voor Nederland niet is geactiveerd. (het symbool midden rechts)

Bovenin rechts is het symbool dat u ziet als de batterij leeg raakt. Rechts onderin de aanduiding AM/PM is de weergave per 12 uur.

- **Instelling met weergave van 12 of 24 uur 's klok**


Het Beveiligde Automatisch Multi-Alarm gebruikt automatisch een 24-uur's klok.

Indien u wilt switchen naar een 12-uur's klok, druk knop 2 en 3 dan gelijktijdig in. AM of PM zal nu te zien zijn aan de rechterkant van de display, als deze op 12 uur 's weergave is gezet. Laat de knoppen los indien u de juiste instelling heeft.




- **DE TIJD INSTELLEN**


Druk knop 1 gedurende een aantal seconden in, totdat het symbool--:-- knippert. Laat dan los.

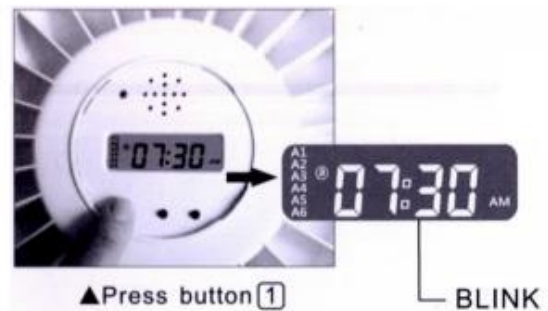

Stel de juiste uren in, door knop 2 in te drukken.

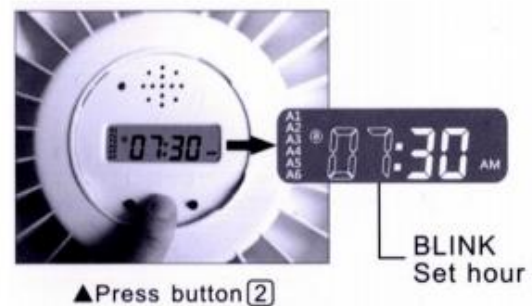

Kies voor knop 3 voor het instellen van de minuten.

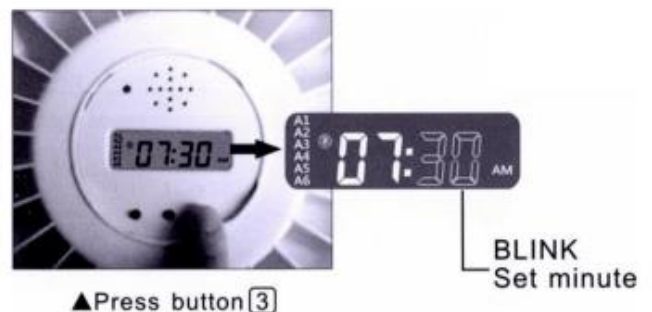

Druk weer op knop 1 voor het bevestigen van de tijdsinstelling.

• **DE ALARMEN INSTELLEN**

- 1) Druk knop 1 in en laat deze los. Het alarm 1 symbool zal gaan knipperen. Om het 1^e alarm in te stellen, drukt u op knop 2 voor de uren en knop 3 voor de minuten. Indien u het alarm wilt wissen, drukt dan knop 2 totdat u --:-- ziet.
- 2) Nadat u de juiste alarmtijd heeft ingesteld, drukt u weer op knop 1 om de alarmtijd te bevestigen en naar de volgende te gaan
- 3) Het alarm 2 symbool gaat knipperen. Om alarm 2 in te stellen, gebruikt u de knoppen 2 & 3.
- 4) Zet eventuele volgende alarmen zoals hierboven beschreven.
- 5) Eindig door knop 1 in te drukken, tot het alarm symbool ophoud met knipperen.
- 6) Na het loslaten van knop 2 of 3, zal de display automatisch terug gaan naar de tijd. Indien u de display laat knipperen in de instelmode, dan zal deze na 1 minuut ook automatisch terugkeren naar de tijd.

• **Een alarm verwijderen.**

U kunt altijd een alarm wijzigen (zie hierboven). Wilt u echter een alarm verwijderen, dan drukt u op knop 1 en laat deze los. Vervolgens drukt u knop 2 een aantal keren in, totdat u --:-- ziet. U bevestigt met knop 1 en gaat weer terug naar de tijd. Het betreffende alarm is nu verwijderd.

• **Alarmtonen**

Het Beveiligd Automatisch Multi-Alarm heeft 3 verschillende alarmtonen en ook een geluidloos alarm.

De symbolen A, B en C die te zien zijn op de display, laten de geselecteerde alarmtonen zien.

Indien u geluidloos (silence) heeft gekozen, dan staat er geen A, B of C op de display en ziet u een knipperend licht.

Het alarm zal maximaal 30 minuten afgaan.

Om de alarmtoon te wijzigen, drukt u eerst knop 3 en vervolgens drukt u knop 1 tegelijkertijd in om de alarmtoon te kiezen. Houd knop 3 ingedrukt en lange tijd knop 1, om de verschillende tonen te beluisteren.



in


• **Een Alarm afzetten.**

Om een alarm af te zetten en medicijnen eruit te halen, pakt u het Beveiligd Automatisch Multi-Alarm op en draai hem om, zodat de medicijnen in uw hand vallen.

• Sluiten en openen

Plaats de sleutel en draai deze een kwart slag naar links om het Beveiligd Automatisch Multi Alarm te sluiten.

Plaats de sleutel en draai een kwart slag naar rechts om het Beveiligd Automatisch Multi Alarm te openen.

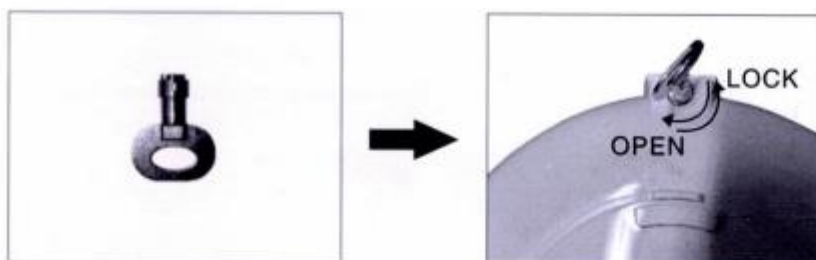

ONDERHOUD

• Testen


Uw Beveiligd Automatische Multi-Alarm heeft een in ingebouwde functie om zichzelf te testen. Om naar het testprogramma te gaan, drukt u knop 2 ongeveer 5 seconden in. U ziet dan CH verschijnen op de display. Om de test af te breken, drukt u op knop 3.



CH test – Wanneer er op de display CH staat, dan is het Beveiligd Automatisch Multi- Alarm klaar om te worden getest. Om de test uit te voeren, druk op knop 2. De carrousel zal de volgende programma's testen.


CH 1 Display test

De display laat CH1 zien. Alle onderdelen van de display lichten op.

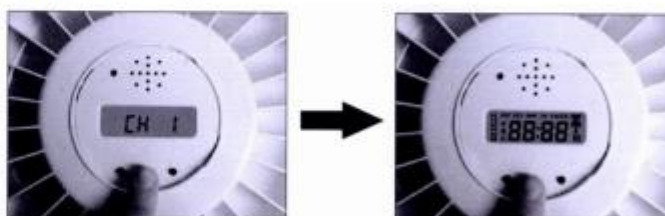

CH2 Display test

De display laat CH2 zien. De motor draait en er schuift 1 vakje op.

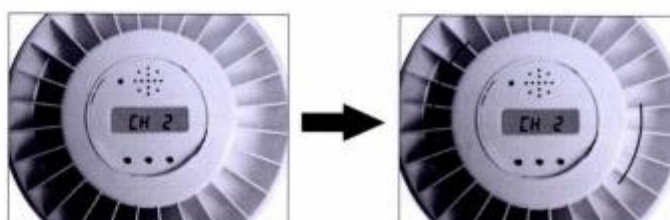

CH3 Alarm test



De display laat CH 3 zien. Het alarm gaat af en het RODE lichtje knippert. Draai de pillendoos om, zodat u de RESET kan testen. Hiermee wordt de medicijn-uitgifte nagebootst. Het geluid en het licht moeten nu stoppen. Wanneer het Beveiligd Automatisch Multi-Alarm niet binnen 10 seconden omgekeerd wordt, zal CH 4 te zien zijn op de display

Wanneer het Beveiligd Automatische Multi-Alarm niet goed roteert, dan zal de motor na een aantal seconden stoppen. De foutmelding op de display is hierbij CH6. Verlaat de test door knop 3 in te drukken.

Wanneer er een foutmelding is, reset dan het Beveiligd Automatisch Multi-Alarm door de batterijen enige minuten te verwijderen en weer terug te plaatsen.

- **Maak alleen schoon met een vochtig doekje of spons.**

- **Batterij gebruik**

Het Beveiligd Automatisch Multi-Alarm zal op stand-by gaan, zodra er geen activiteiten plaats vinden gedurende verschillende minuten. De display weergave zal ook uitgeschakeld worden. Om de display weer te activeren, tilt u het Beveiligd Automatisch Multi-Alarm op en drukt u op knop 3.

- **Batterij raakt leeg**

Er verschijnt een batterij-symbool (rechts bovenin de display) als de batterij leeg raakt. Vervang vervolgens de 4 AA batterijen.

Belangrijk!

Indien de zegel op de achterzijde van de pillendoos is verbroken, vervalt de garantie.