



88% des patients pensent que le masque AirFit N20 est plus confortable que l'un des masques nasaux leader sur le marché ^{2,3}

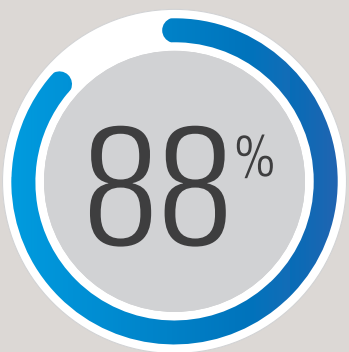


La technologie de la bulle évolue : plusieurs épaisseurs pour plus de confort et de stabilité

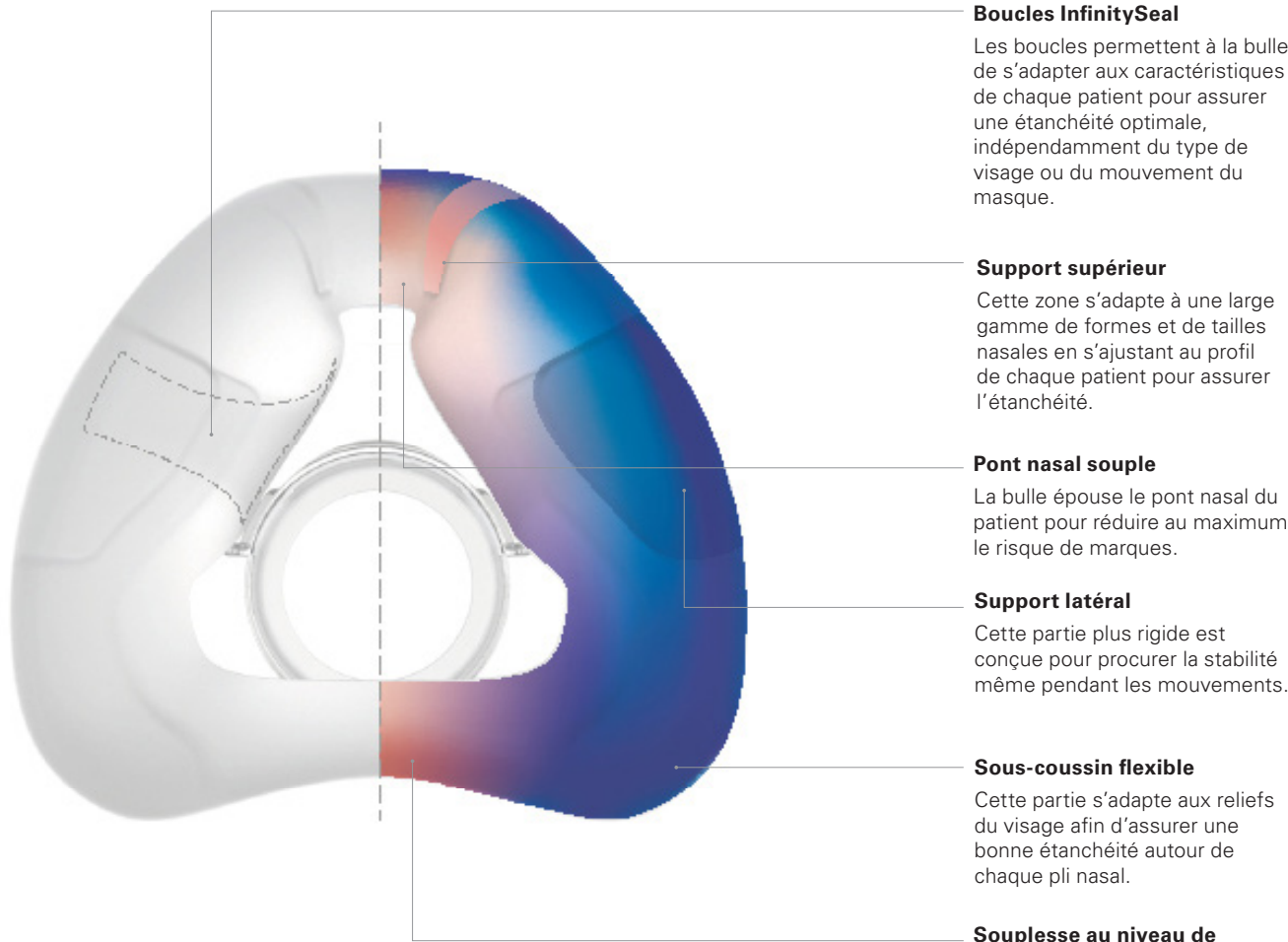

- Boucles InfinitySeal**
Les boucles permettent à la bulle de s'adapter aux caractéristiques de chaque patient pour assurer une étanchéité optimale, indépendamment du type de visage ou du mouvement du masque.
- Support supérieur**
Cette zone s'adapte à une large gamme de formes et de tailles nasales en s'ajustant au profil de chaque patient pour assurer l'étanchéité.
- Pont nasal souple**
La bulle épouse le pont nasal du patient pour réduire au maximum le risque de marques.
- Support latéral**
Cette partie plus rigide est conçue pour procurer la stabilité même pendant les mouvements.
- Sous-coussin flexible**
Cette partie s'adapte aux reliefs du visage afin d'assurer une bonne étanchéité autour de chaque pli nasal.

Souplesse au niveau de la lèvre supérieure
Le silicone est plus fin pour soulager la pression autour de la lèvre supérieure et offrir aux patients une sensation de confort encore plus grande.

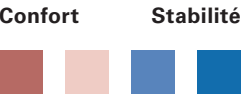

Guide de mise en place du masque nasal AirFit N20



- Assurez-vous que les clips magnétiques des sangles inférieures sont bien détachés.
- Si les clips sont connectés, détachez-les de l'entourage.
- Faites passer le harnais par dessus votre crâne en vous assurant que le logo ResMed est tourné vers l'extérieur.
- Passez les sangles inférieures sous vos oreilles et attachez les clips magnétiques sur les côtés de l'entourage.



- Détachez les bandes velcro® des sangles supérieures du harnais.
- Ajustez les sangles uniformément jusqu'à ce que le masque soit confortable et stable, puis rattachiez les bandes adhésives.
- Faites de même avec les attaches velcro® des sangles inférieures du harnais.
- Mettez votre appareil en marche et connectez le circuit au masque.
- Finalisez l'ajustement de la bulle et du harnais jusqu'à ce que le masque soit confortable.

Remarque : pour les instructions d'utilisation complètes, reportez-vous au guide d'utilisation.



1 Etude de mise en place ResMed ID A3697629. 159 patients utilisateurs de masques nasaux. Comparaison des masques AirFit N20 (ResMed) et Wisp (Philips). USA, Europe et Asie-Pacifique. Novembre 2015.
2 Etude interne ResMed ID A3695085. Comparaison du masque AirFit N20 (ResMed) et du masque Wisp (Philips). 24 patients. Décembre 2015.
3 Wisp est identifié comme l'un des leaders sur les segments de masques nasaux d'après des données de marché US - données disponibles sur demande.

ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia
FABRICANT

ResMed (UK) Ltd, 96 Jubilee Avenue, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire - OX14 4R, Royaume-Uni
Distribué par ResMed SAS, Parc technologique de Lyon - 292 Allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex, France.

AirFit, InfinitySeal et Quick Fit sont des marques déposées de ResMed Ltd. AirFit est une marque commerciale de ResMed Ltd.
© 2016 ResMed Ltd. 1019700/1 2016-10

CE
0123



AirFit™ N20
Masque nasal



99%
de patients utilisateurs de masques nasaux ont réussi à mettre en place le masque AirFit N20 et à obtenir une bonne étanchéité ¹

Rédéfinissez la notion de confort avec le masque nasal AirFit N20

ResMed innove et réinvente la définition de confort grâce à la nouvelle technologie de bulle InfinitySeal™. Le masque s'adapte aux mouvements des patients offrant confort et étanchéité, quelle que soit la taille ou la forme du visage du patient.



Facile à mettre en place

Lors d'une étude sur 159 patients¹, 99,4% ont pu mettre en place le masque et obtenir une bonne étanchéité. Dès le début du traitement, la nouvelle bulle en silicone s'adapte aux différentes formes de visage.

Confortable


De la bulle au harnais, l'AirFit N20 est léger et doux. 88 % des patients ont préféré le masque AirFit N20 en termes de confort par rapport au masque nasal leader du marché.²

Liberté visuelle


Grâce au design compact et discret du masque, les patients peuvent lire ou regarder la télévision, tout en suivant leur traitement.

Le masque nasal favori des patients

92% des patients ont préféré le masque nasal AirFit N20 en comparaison avec un des masques nasaux leader sur le marché ^{2,3}

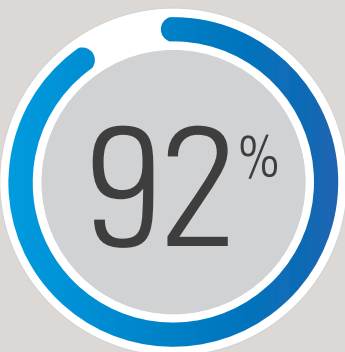

Lors d’une étude internationale sur 159 patients, 99% des participants ont pu mettre en place le masque et obtenir une bonne étanchéité.¹

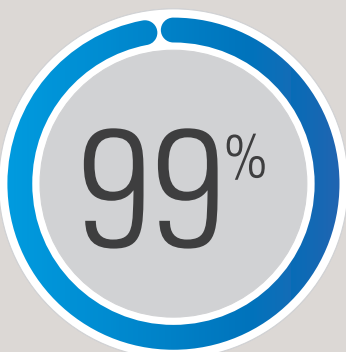


Choix de la taille

L’AirFit N20 possède 3 tailles de bulles : small, medium et large. Grâce à la conception modulaire de l’AirFit N20, chaque taille de bulle se fixe aisément à l’entourage. Il est ainsi plus facile d’échanger les bulles pour plus de flexibilité.

Afin de choisir la taille la plus adaptée, utilisez le gabarit de l’AirFit N20 comme guide.

Vous pouvez le télécharger sur le site [ResMed.com/AirFitN20](https://www.resmed.com/AirFitN20)

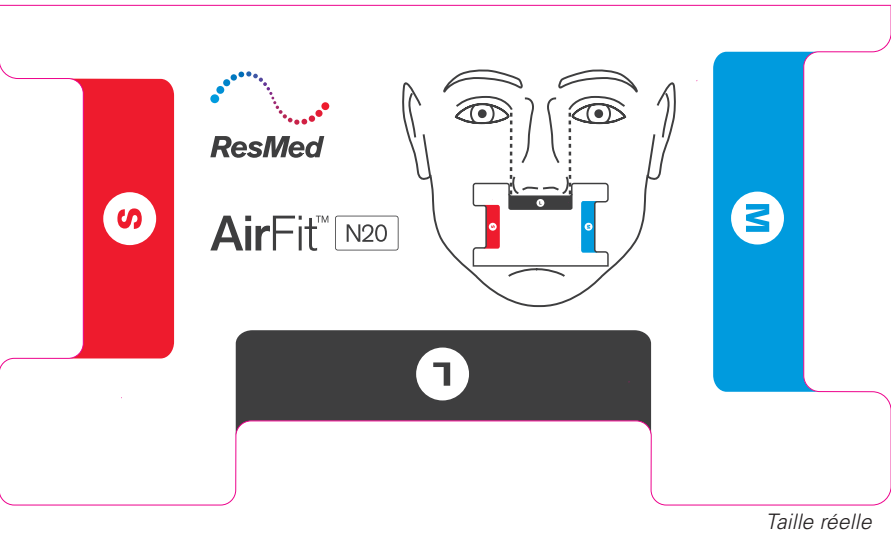

Codes produits

AirFit N20: Small	63509
AirFit N20 for Her Small	63510
AirFit N20: Medium	63511
AirFit N20: Large	63512

Doux et moelleux
Spécifiquement conçu pour apporter plus de douceur, le harnais aide les patients à se sentir plus rapidement à l’aise avec leur traitement.

Etanchéité
La bulle de l’AirFit N20 bénéficie de la nouvelle technologie InfinitySeal conçue pour prévenir les fuites, tolérer les erreurs de mise en place et être étanche même avec des variabilités de pression.

Extra flexible
Le circuit court se clipse sur l’entourage du masque grâce au coude à retrait rapide. Totalement flexible, le circuit permet aux patients de bouger sans provoquer de fuite.

Entourage doux
L’entourage est constitué de mousse et de tissu doux pour apporter plus de douceur et de confort sur le visage.

Champ de vision dégagé
Laissons aux patients l’opportunité de voir, grâce à l’entourage sans support frontal qui combine stabilité et contact réduit avec le visage.

Mise en place rapide
Le masque s’installe et se retire facilement et rapidement grâce aux clips magnétiques qui guident en un instant le harnais vers l’entourage.

Coude et tuyau à air court
63565

Entourage
63566

Bulle
63550 (S)
63551 (M)
63552 (L)

Harnais de l’AirFit N20
63560 (S)
63561 (STD)
63562 (L)

Harnais de l’AirFit N20 for Her
63558

AirFit N20 for Her

Le masque AirFit N20 for Her est spécifiquement pensé pour les femmes grâce à sa taille plus petite et plus adaptée à la morphologie féminine.

